

**Hear now. And always**

તમારા Cochlear™ Nucleus®

Sound Processor સંભાળ

અને જાળવણી માટેની ટિપ્સ



## તમારા બિહાઈન્ડ- ધ- ઈયર (BTE) સાઉન્ડ પ્રોસેસરની સંભાળ અને જાળવણી


દરરોજ



સૂકા મુલાયમ કપડાં વડે લૂછીને કોરું કરીને સ્વચ્છ કરો.




મુલાયમ બ્રશની મદદથી કનેક્ટર પિન્સને સાફ કરો.

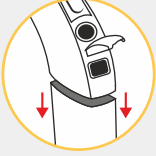

બેટરી કાઢી નાખો અને કોન્ટેક્ટ પિન્સને સાફ કરો.




વળેલા કેબલે ને તૂટી જતા બાચાવા માટે સીધો કરો.

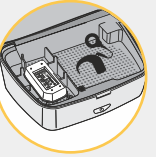

રાત્રે, કોક્સિયર દ્વારા આપવામાં આવેલ Dry & Store® યુનિટમાં પ્રોસેસરને સ્ટોર કરો.  
- રિચાર્જ કરી શકાય તેવી બેટરીનો ઉપયોગ કરનાર માટે: બેટરીને પ્રોસેસર થી અલગ પાડો અને જરૂર જણાય તો રિચાર્જ કરો. કોઇલને પ્રોસેસિંગ યુનિટ સાથે રહેવા દો અને Dry & Store® યુનિટમાં રાખો  
- ડિસ્પોઝેબલ બેટરીનો ઉપયોગ કરનાર માટે: પ્રોસેસર ના ભાગ એક બીજા સાથે જેમ જોડાયેલ છે તેમજ સંપૂર્ણ પ્રોસેસર મુકો

અઠવાડિક

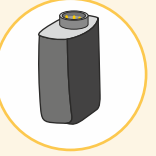

બેટરી મોડ્યુલ, કોઇલ, કોઇલ કેબલે, મેગ્નેટ ને પ્રોસેસર થી અલગ પાડો. સુકકી મુલાયમ કપડા અને બ્રશ નો ઉપયોગ કરી કોન્ટેક્ટ પોઇન્ટ્સ સાફ કરો. (કાનના હૂકને ખોલવાની જરૂર નથી )

દર 2 મહિને



Dry-Brik® desiccant બદલો.  
Dry-Brik® 2 મહિનાના ઉપયોગ પછી ચોક્કસ વાતાવરણમાં તેની ભેજ શોષણ શક્તિ ગુમાવી શકે છે અને તેથી તમારા સાઉન્ડ પ્રોસેસરને તે ભેજ મુક્ત રાખવાની ખાતરી આપવા માટે અસરકારક ન હોઈ શકે.

દર 3 મહિને



માઇક્રોફોન પ્રોટેક્ટરને બદલો - અવાજની ગુણવત્તા માટે આ ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે.

મોસમી



વરસાદ અને વધુ પડતા પરસેવાથી બચાવવા માટે એક્વા+ સ્લીવનો ઉપયોગ કરો.

સંભાળ અને જાળવણી અંગે વિગતવાર માર્ગદર્શન મેળવવા માટે તમારી સાઉન્ડ પ્રોસેસર વપરાશકર્તા વિષયક માર્ગદર્શિકાનો સંદર્ભ લો



## તમારા ઓફ-ધ-ઈયર (OTE) સાઉન્ડ પ્રોસેસરની સંભાળ અને જાળવણી

દરરોજ




તમારા સાઉન્ડ પ્રોસેસરના તમામ ભાગ અને એસેસરીઝ તપાસો, જેમ કે Cochlear® SoftWear™ પેડ્સ, સલામતી ક્લિપ. કચરો અને ધૂળ વગેરે માટે સૂકા મુલાયમ કપડાં વડે લૂછીને કોરું કરીને સ્વચ્છ કરો.

તમારા પ્રોસેસરને દરરોજ રાત્રે સૂકવીને ભેજથી મુક્ત રાખો:



Kanso® 2 Sound Processor કેસમાં, તેને હોમ ચાર્જરમાં સંપૂર્ણ રીતે ગોઠવીને સ્ટોર કરો.

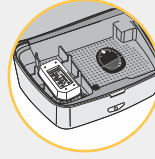

Kanso Sound Processor ને Dry & Store® યુનિટમાં સંપૂર્ણપણે જેમ જોડાયેલ છે તેમજ સ્ટોર કરો.

માસિક



સોફ્ટવેર પેડ (જો વપરાયેલ હોય તો) જો તે પહેરવામાં આવે અથવા બગડેલા હોય તો તેને બદલો.



તપાસો કે શું સલામતી ક્લિપ (જો વપરાશમાં છે) ઘસારાના સંકેતો દર્શાવે છે. જરૂરિયાત પ્રમાણે બદલો.



Kanso Sound Processor માટે, બેટરી કાઢી નાખો અને કોન્ટેક્ટ્સને સૂકા મુલાયમ કપડાથી સાફ કરો.

દર 2 મહિને



જો તમે Dry & Store® યુનિટનો ઉપયોગ કરો છો, તો Dry-Brik® ને બદલો. Dry-Brik® 2 મહિનાના ઉપયોગ પછી ચોક્કસ વાતાવરણમાં તેની ભેજ શોષણ શક્તિ ગુમાવી શકે છે અને તેથી તમારા સાઉન્ડ પ્રોસેસરને ભેજ મુક્ત રાખવાની ખાતરી કરવા માટે તે અસરકારક ન હોઈ શકે.

દર 3 મહિને



માઇક્રોફોન પ્રોટેક્ટરને બદલો - અવાજની ગુણવત્તા માટે આ ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે.

મોસમી



વરસાદ અને વધુ પડતા પરસેવાથી બચાવવા માટે એક્વા+ સ્લીવનો ઉપયોગ કરો.

સંભાળ અને જાળવણી અંગે વિગતવાર માર્ગદર્શન મેળવવા માટે તમારી સાઉન્ડ પ્રોસેસર વપરાશકર્તા વિષયક માર્ગદર્શિકાનો સંદર્ભ લો



## હંમેશા

- તમારા સાઉન્ડ પ્રોસેસરને પહેરતી વખતે કાનના એ ભાગ ને હંમેશા સાફ અને સૂકું રાખો. તે ભાગમાં તેલ અથવા કોઈ પણ હેર પ્રોડ્યુક્ટ્સ જેમ કે હેર સ્પ્રે/ જેલ વાપરવા નહિ.
- સાઉન્ડ પ્રોસેસરના કોઈપણ ભાગમાં રેતી અથવા ગંદકી થવા દેવી નહિ.  
જો આવું ક્યારેય પણ થાય, તો તેને શક્ય થઈ એટલી રેતી હલાવીને કાઢો અને, તમારા સાઉન્ડ પ્રોસેસરને મુલાયમ, સૂકા કપડાથી સાફ કરો. તે યોગ્ય રીતે કામ કરી રહ્યું છે કે નહીં તે ચકાસો. જો તે કામ ન કરે, તેને સરખું કરવા માટે તમારા લોકલ ક્લિનિક નો સંપર્ક કરો.



## કદાપિ નહીં

- કેબલને ક્યારેય વાળશો નહીં અથવા ખેંચશો નહીં
- તમારા સાઉન્ડ પ્રોસેસરને સીધા સૂર્યપ્રકાશ અથવા કાર ની અંદર વધારે ગરમી માં કદી ન રાખો .
- સ્નાન કરતી વખતે, સ્વિમિંગ કરતી વખતે અથવા શાવર લેતી વખતે એક્વા+ સ્લીવ વિના ક્યારેય તમારું સાઉન્ડ પ્રોસેસર ન પહેરો. જો તમારું સાઉન્ડ પ્રોસેસર ભીનું થઈ જાય, તો તેને લૂછીને સૂકવી અને Dry & Store® યુનિટ/હોમ ચાર્જરમાં ઓછામાં ઓછા બાર કલાક માટે મૂકો. જો તે કામ કરવામાં નિષ્ફળ જાય, તો તરત જ તેને તમારા સ્થાનિક દવાખાનામાં દેખાડો.

Cochlear Nucleus ગ્લોબલ વોરંટી પ્રમાણે જો તેમના પ્રોસેસરનો પાણીમાં ઉપયોગ કર્યો હોવાનો પુરાવો મળે તો તમારી વોરંટી રદ થશે જે તમારા પ્રોસેસરના વપરાશકર્તા માટેની માર્ગદર્શિકામાં આપેલ સૂચનાઓ અથવા કોઈપણ Cochlear-બ્રાન્ડેડ પાણી પ્રતિરોધક કેસીંગના વપરાશકર્તા માટેની માર્ગદર્શિકામાંની સૂચનાઓ અનુસાર નથી.



સંભાળ અને જાળવણી વિશે વધુ ટિપ્સ જાણવા માટે  
QR કોડને સ્કેન કરો

# Hear now. And always

Cochlear is dedicated to helping people with moderate to profound hearing loss experience a world full of hearing. As the global leader in implantable hearing solutions, we have provided more than 700,000 devices and helped people of all ages to hear and connect with life's opportunities.

We aim to give people the best lifelong hearing experience and access to next generation technologies. We collaborate with leading clinical, research and support networks to advance hearing science and improve care.

That's why more people choose Cochlear than any other hearing implant company.

 Cochlear Medical Device Company India Pvt. Ltd.

204, Second Floor, Platina Bldg., Plot No. C 59, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai, 400051 - India Tel: +91 20 6708 2935 Fax: +91 22 6112 1100

[www.cochlear.com/in](http://www.cochlear.com/in)

Please seek advice from your health professional about treatments for hearing loss. Outcomes may vary, and your health professional will advise you about the factors which could affect your outcome. Always follow the instructions for use. Not all products are available in all countries. Please contact your local Cochlear representative for product information.

The Cochlear Nucleus 8 Sound Processor is dust and water resistant to level IP68 of the International Standard IEC60529. The Nucleus 8 Sound Processor was tested to a depth of up to 1 metre for up to 1 hour. Refer to the relevant user guide for more information.

The Kanso 2 Sound Processor is dust and water resistant to level of IP68 of the International Standard IEC60529.

The Cochlear Nucleus 8 and Kanso 2 Sound Processor with Aqua+ is dust and water resistant to level IP68 of the International Standard IEC60529. The Nucleus 8 and Kanso 2 Sound Processor with Aqua+ can be continuously submerged under water to a depth of up to 3 metres for up to 2 hours. Refer to the relevant user guide for more information.

Cochlear, Hear now. And always, Nucleus, Kanso, the elliptical logo, and marks bearing an ® or ™ symbol, are either trademarks or registered trademarks of Cochlear Limited (unless otherwise noted). Dry & Store and Dry-Brik are registered trademarks of Ear Technology Corporation.

© Cochlear Limited 2023. D2068802 V2 JUN2023.